

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Избегайте использования прибора под одеялом или другими укрывными материалами.
2. При использовании прибора в положении на полу используйте коврик.
3. Во время пользования аппаратом не садитесь, а также не кладите какие либо предметы на него.
4. Не одевайте насадки на аппарат при установленном переключателе в режиме «НОТ /ТЕПЛО/».

0

Поверхность прибора нагревается до температуры 55°C. Лицам с пониженной температурной чувствительностью рекомендуется быть предельно осторожным при использовании прибора в режиме нагрева. В случае повреждения шнура электропитания, во избежание возникновения опасной ситуации необходимо заменить его на заводе-изготовителе или у агента по обслуживанию, либо у специалиста, имеющего соответствующую квалификацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Переменный ток 220В 50/60 Гц 20 Вт (ТЕПЛО) 18Вт (ХОЛОД)


Максимальная температура.....55°C

Вес-нетто..... 1,1 кг

Размеры..... 300 x 110 x 120 мм

Скорость..... 4500 оборотов / мин.

Насадки4 вида

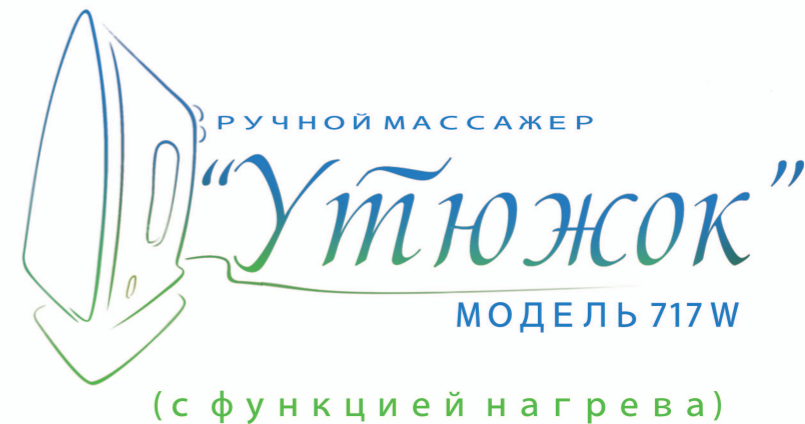

Инструкция по применению

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

1. Настоящий массажер сочетает в себе вертикальное движение с неравномерным вращательным движением, который усиливает эффект массажа.
2. Мощная неравномерная вибрация создает ощущение ручного массажа.
3. Массаж с включенным нагревом является более эффективным для снятия усталости и скованности. Температура нагревающей поверхности достигает 55°C(131°F).
Режим тепло и режим холод изменяется переключателем аппарата.
4. Аппарат рассчитан на длительное использование, его применение совершенно безопасно.


СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Установите переключатель в режим «Тепло» или режим «Холод» в соответствии с необходимостью. Для нагрева аппарата до максимального значения в 55°C(131°F) потребуется 3-4 минуты. При использовании аппарата в режиме «Тепло» не пользуйтесь насадками.
2. Вы можете сделать массаж на любом участке тела без посторонней помощи, кроме массажа спины.
3. Для массажа ступней положите коврик на пол, на коврик установите массажер, перевернутый массажной поверхностью кверху. Затем на массажер поставьте ступню. Во избежание неполадок аппарата массаж рекомендуется делать в положении сидя. Вставать на массажер запрещено.
4. Использование насадок (см. ниже).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК:

Используйте насадки в режиме «Холод». Насадки не нагреваются, даже если массажер переключен на режим «Тепло».

Тип (А) Точечная насадка.

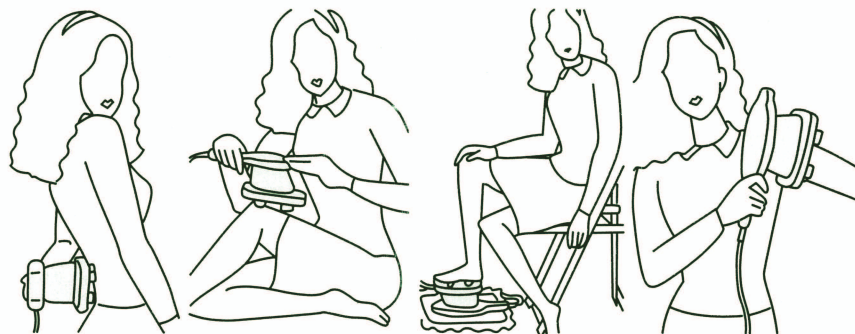


Одеть насадку на массажер, приложить к области, в которой ощущается дискомфорт. Насадка имеет четыре проекции (точки), что позволяет отлично бороться с такими недугами, как «застывшее» плечо, невралгия, спазмы на теле и конечностях. На стопах человека находится большое количество нервных окончаний, образующих рефлексогенные зоны, которые связывают участки стопы с определенными внутренними органами, поэтому точечный массаж, выполняемый зигзагообразными вибрациями при помощи данной насадки, является отличным средством для снятия усталости.

Тип (В) Конусная насадка.




Одеть конусную насадку на точечную. Конусная насадка предназначена для мягкого массажного воздействия на грудь, лицо и заднюю часть шеи.

Тип (С) Щеточная насадка.

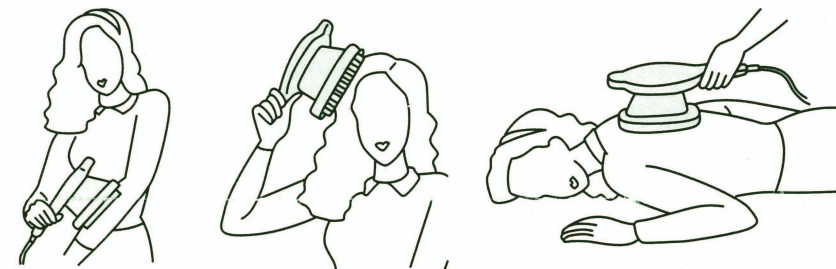

В восточной медицине щеточный массаж считается эффективным при проблемах внутренних органов, «застывшего» плеча, диспепсии и запора. Насадка помогает вернуть коже свежесть и повышает устойчивость к холоду. Идеальна для щеточного расчесывания головы.

Тип (D) Мягкая насадка.

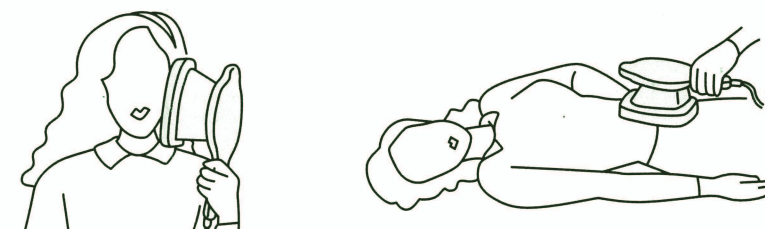

Она используется для мягкого массажа лица и лучшего впитывания крема.

